

TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MULTIFUNCIONAL

Marca: YOBEKAN / Modelo: KV-11


FINALIDADES:

1. Medição e monitorização da temperatura do corpo humano;
2. Medição da temperatura de objetos e líquidos: meça a temperatura da superfície de objetos e líquidos, como a água do banho do bebê, leite da mamadeira etc.
3. Medição da temperatura ambiental.

*****UTILIZE PILHAS ALCALINAS PARA CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.**

COMO USAR:

- Para ligar, pressione o gatilho (*switch*);
- Escolha entre a opção de “medição corporal - BODY” ou “superfícies – SURFACE TEMP” através do botão “SET”;
- Posicione a mira no meio da testa da pessoa ou superfície, a uma distância de 3 a 5cm. Certifique-se de que não haja cabelo, suor, chapéu, ou qualquer obstáculo na frente. Mantenha a proximidade e estabilidade da mira para maior precisão.
- Pressione o gatilho (*switch*).
- Ao ouvir o “BIP”, o resultado será mostrado no visor LCD.

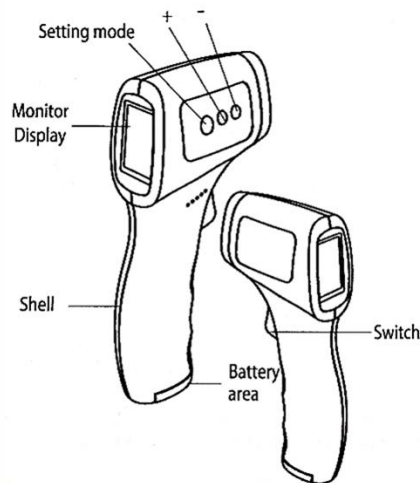

Configuração de memória

O equipamento possui capacidade de armazenar as últimas 32 medidas de temperatura. Com o aparelho ligado, aperte +/- para acessar as medidas armazenadas. O sistema irá deletar todos os arquivos depois de 32 medidas.

Configuração de Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F)

Com o aparelho ligado, aperte e segure o botão “SET” para acessar o menu **F1**. Selecione + ou – para alternar entre °C ou °F.

Alarme de febre

Com o aparelho ligado, aperte e segure o botão “SET” e aperte brevemente em seguida para acessar o menu **F2**.

Defina por + ou – o limite da temperatura para soar o alarme de febre.

Calibração da precisão

Com o aparelho ligado, aperte e segure o botão “SET” e aperte brevemente em seguida até acessar o menu **F3**.

Defina com + ou – para acrescentar ou diminuir 0.1°C ou °F, se necessário.

Ativar ou desativar o som

Com o aparelho ligado, aperte e segure o botão “SET” e aperte brevemente em seguida até acessar o menu **F4**.

Defina com + ou – para ativar ou desativar o som.

Display Luminoso

Temperatura corporal: 34.0-37.3°C (93.2-99.14°F) Verde

Temperatura corporal: 37.4-38.0°C (99.32-100.4°F) Laranja

Temperatura corporal: 38.1-42.9°C (105.8-109.22°F) Vermelho

Significado das legendas:

Hi Temperatura acima de 43°C

Lo Temperatura abaixo de 36°C

ESPECIFICAÇÕES

- Tempo de resposta: cerca de 2 segundos
- Distância da superfície: 3cm-5cm
- Precisão: +/-1°C (ou +/-1°F)
- Faixa de medição: Corpo humano (32-42,5°C) – Superfícies (0-60°C)
- Armazenamento: 32 memórias
- Energia: 2 pilhas alcalinas AAA
- Desligamento automático: 8 segundos
- Tamanho: 15x9x4 mm
- Peso: Cerca de 100g (sem as baterias)
- Material: ABS